

Skinial S 400

PIGMENT-ENTFERNUNGS-GERÄT

Benutzerhandbuch

deutsch (Seite 1 – 11) / **français** (page 12 – 22) / **english** (page 23 – 33)



1 INHALTSVERZEICHNIS

Produktbeschreibung / Verwendungszweck:

Dieses Gerät kann für die Entfernung und Korrektur von unerwünschten Pigmentierungen verwendet werden, die durch Permanent Make Up, das Tätowieren oder Mikroblading entstanden sind. Es gelten ausdrücklich alle Einschränkungen und Hinweise hinsichtlich der Behandlung, auf die in der Skinial Schulung explizit hingewiesen wird. Bei der Behandlung sind die jeweiligen national und lokal vorgeschriebenen, hygienischen und gewerberechtlichen Bedingungen einzuhalten. Informieren Sie sich bei Ihren Branchenverbänden und den Aufsichtsbehörden, denn diese Bedingungen unterliegen ständigen Veränderungen und Anpassungen.

Dieses Gerät ist sowohl für die Entfernung, als auch die Anbringung von Permanent Make Up und Tätowierungen geeignet. Beachten Sie hierbei die ggf. erforderlichen besonderen Anforderungsbedingungen und Nadelqualitäten.

Technische Daten

Stromversorgung: AC 100-240V/50-60 Hz

Ausgang: 19 V/2A

Leistung: 24 W

Umfang der Lieferung:

Das S 400 Produkte-Set enthält folgende Komponenten

- 1 x Steuergerät
- 1 x Mechanischer- und magnetischer Halter für das Steuergerät
- 1 x Netzgerät mit EU Stecker
- 1 x Handstück
- 1 x Verbindungskabel
- 10 x Skinial Nadel 7 RS
- 1 x Ablagehalterung für das Handstück mit zwei Performanceen für 9 mm Farbtöpfchen

Optional ist ein Fußschalter erhältlich.

Sicherheitshinweise:

- Dieses Gerät darf nur von geschulten Personen verwendet werden, die eine Skinial Ausbildung für PMU und/oder Body Entfernung besucht, oder bereits über eine kosmetische oder medizinische Ausbildung, oder bereits mehrjährige Erfahrung im Umgang mit Pigmentier-Geräten haben.
- Im Falle eines Weiterverkaufs sollte diese Betriebsanleitung dem Gerät mitgegeben werden.
- Dies ist ein professionelles Gerät, halten Sie es von Kindern fern.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich das Original-Netzteil.
- Bei Beschädigungen oder Funktionsstörungen senden Sie uns bitte das Gerät mit dem Kaufnachweis an die nachfolgende Adresse. Öffnen Sie die Geräte nicht selbst und nehmen keine eigenmächtigen Reparaturen vor, da sonst die Garantie erlischt.

Logistic-Mail-Factory GmbH
c/o MIMO GmbH
Affinger Straße 7
D-86167 Augsburg

- Bei unsachgemäßer Verwendung, Lagerung oder Transport des Steuergeräts oder des Handstücks können Schäden auftreten. Die bestimmungsgemäße Benutzung des Gerätes, wie es in dieser Betriebsanleitung angegeben ist, ist die Voraussetzung für eine sichere Anwendung für Sie und Ihre Kunden und die Grundlage der Hersteller- Garantie.

2 AUFBAU UND EINRICHTUNG DES STEUERGERÄTES

Versichern Sie sich, dass Adapter, Handstück und Fußschalter (optional) richtig angeschlossen sind (siehe Aufbauanleitung unten).

Anschluss des Handstücks

**Anschluss des Fußschalters
(optional)**

Anschluss des Netzgerätes



Montage des Steuergerät-Halters

(1) Nehmen Sie alle Teile des Halter-Bausatzes aus der Verpackung



- (2) Entscheiden Sie ob den Halter lieber mit Saugnäpfen (glatte Oberfläche) oder mit den starken Magneten (Metalloberfläche) bestücken wollen.
- (3) Montieren Sie die drei Magnete oder die Saugnäpfe an die Unterseite der dreieckigen Bodenplatte des Ständers.
- (4) Befestigen Sie das Steuergerät auf der Vorderseite des Metallgestells mithilfe der mitgelieferten Stellschrauben, die Sie von hinten durch die Öffnung im Metallrahmen stecken und in das Gewinde auf der Rückseite des Steuergerätes schrauben. Achten Sie darauf, dass das Steuergerät immer auf einer festen und stabilen Unterlage steht.



- (5) Bewahren Sie die übrigen Teile der Befestigung auf, um die Standfüße, für den Fall einer veränderten Unterlage, wechseln zu können.



3 BEDIENUNGSANLEITUNG DES STEUERGERÄTES

- (1) Berühren Sie drei Sekunden lang die "POWER" Fläche mit dem Finger, um das Steuergerät ein- oder auszuschalten. (Touch-Screen)
- (2) Wählen Sie durch Berühren der Taste (IOI) die voreingestellte Geschwindigkeit. Wir empfehlen "140 / Min. BROW " als Standard für PMU und Body Behandlungen. Bei sensibler Haut kann die Geschwindigkeit reduziert werden.
- (3) Durch Berühren der „START“ Fläche starten Sie das Gerät. Durch Betätigung der Tasten „>“ können Sie die Geschwindigkeit in 10'er Schritten erhöhen oder mit Betätigung der Taste „<“ in 10'er Schritten verringern. Die Geschwindigkeit kann auch bei laufendem Gerät verändert werden.
- (4) Stellen Sie nun die korrekte Nadellänge am Handgerät ein. Drehen Sie das Gewinde (siehe Punkt 4 unter Hinweise/Handgerät) bis zur gewünschten Nadellänge.
- (5) NPS = ca. Geschwindigkeit der Nadel; Hubbewegungen der Nadel pro Sekunde.
- (6) Das Gerät kann auch für **Permanent Make Up** Anwendungen verwendet werden. Für Skinial Anwendungen sollte Sie nur die Einstellungen BROW und LIP verwenden. Bitte achten Sie darauf die korrekte Nadelgeschwindigkeit einzustellen.
- (7) An der Buchse „Foot“ kann ein Fußschalter (optional erhältlich) angeschlossen werden.

Wählen Sie im „Menü“ weitere Voreinstellungen wie z.B.

- a. EYE – Augen (nur PMU)
- b. LIP – Lippen (**Skinial** + PMU)
- c. BROW – Augenbraue (**Skinial Body & PMU + PMU**)
- d. MEDICAL – (medizinische Anwendungen)
- e. MESO – (Meso-Therapie)



LED Display (Menüanzeige und Geschwindigkeit)

Geschwindigkeit erhöhen

Menü Auswahl


Geschwindigkeit reduzieren

Start/Stopp des Handstücks

Ein-/Aushalter

4 Das HANDSTÜCK

- (1) Verbinden Sie das Handstück mit der Steuereinheit.
- (2) Stecken Sie die Nadel Kartusche auf das Handstück. Stellen Sie sicher, dass die Kartusche mit einem Klick einrastet.
- (3) Durch Drehen des Handstück-Kopfes können Sie die Nadellänge einstellen.

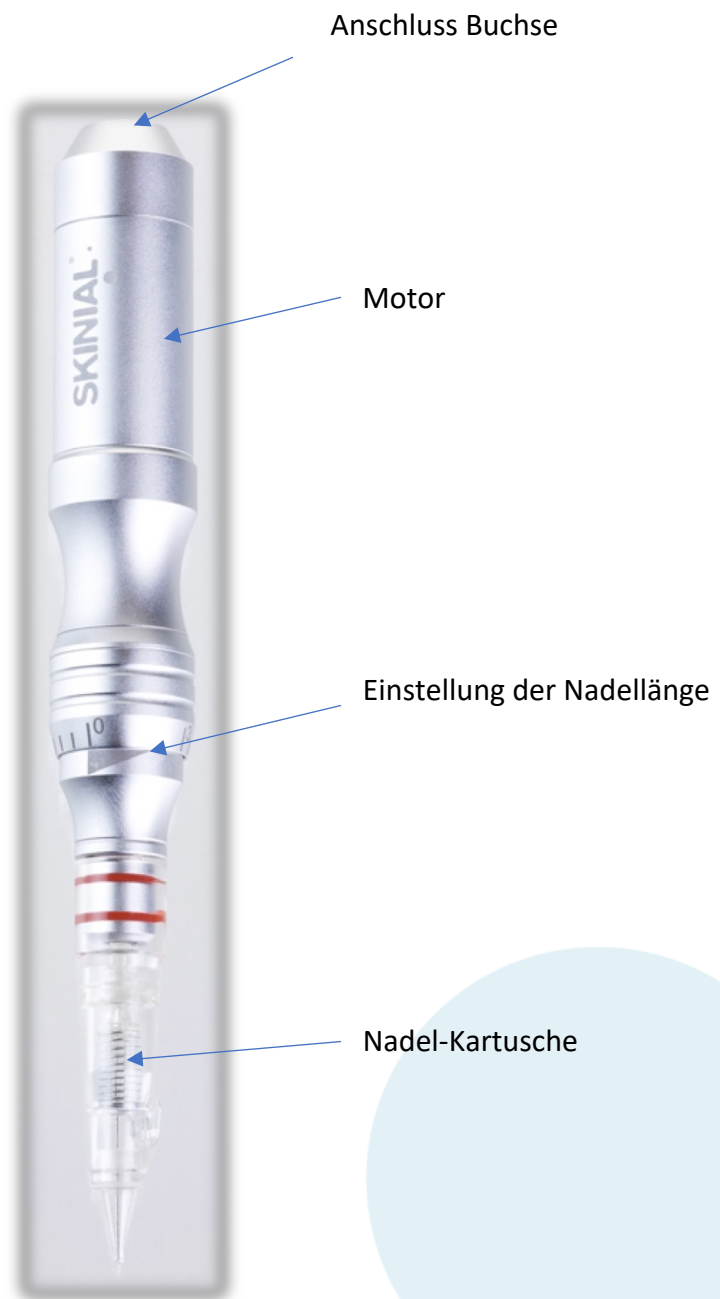

Hinweis:

1. Das Skinial S-400 Handstück verwendet einen Schweizer 12 V Motor. Verwenden Sie unter keinen Umständen ein Netzteil mit mehr als 12 V Spannung.
2. Verwenden Sie möglichst nur das Original Skinial Netzteil.
3. Zur Einstellung der Nadellänge starten Sie das Gerät mit einer niedrigen Geschwindigkeit um zu beobachten, wie weit die Nadel aus der Kartusche herausragt.
4. Drehen Sie am vorderen Gewindekopf und korrigieren Sie den Nadel Hub bei laufendem Gerät vor hellem Hintergrund auf die gewünschte Länge. Der aufgedruckte Maßstab ist relativ, er ist nicht geeicht und kann daher nicht zur Einstellung der Millimeter herangezogen werden.

Nadellänge durch Drehen einstellen



5. Überdrehen Sie nicht das Gewinde für die Einstellung der Nadellänge, da dies das Handstück beschädigen könnte.
6. Überprüfen Sie während der Behandlung regelmäßig die korrekte Nadellänge, um versehentliche Veränderungen rechtzeitig zu erkennen. Wenn die Kartusche nicht korrekt auf das Handstück aufgesteckt ist, kann es zu Fehlfunktionen kommen.
7. Bitte lagern und entsorgen Sie eine verwendete Einweg-Nadel in einem gesonderten Behälter (Sondermüll) und verwenden Sie nie gebrauchte Nadeln.

5 HANDGERÄT HALTER

Legen Sie das Handgerät immer stabil und sicher in die massive Handgeräthalterung, wie unten gezeigt (Bild). Auf deren Auflagefläche und an der Unterseite befinden sich rutschfeste Kunststoffnoppen. Zwei Farb-Töpfchen Vertiefungen (9 mm) garantieren eine stabile Befüllung mit der jeweiligen Skinial Entfernungsfüssigkeit.



6 NADEL KARTUSCHEN

Wir verwenden nur hochwertige Nadel-Kartuschen. **ACHTUNG: Für die Pigmententfernung mit Skinial ist ausschließlich die Nadelgröße 7 RS geeignet.** Skinial bietet weitere Kartuschen-Größen für die Verwendung des Handgerätes für Permanent-Make-Up an. Jede Nadel ist einzeln und steril verpackt.



10er Box, Einzelverpackung,



Nadel-Kartusche Präzisionskartusche

7 SONSTIGES

Normen, Gesetze Richtlinien, Produktkennzeichnung, (CE Konformitätserklärung)

Dieses Gerät entspricht zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Betriebsanleitung allen notwendigen Rechtsnormen in der EU incl. der CE Konformitätserklärung. Wir behalten uns Änderungen und technische Verbesserungen zum Nutze unserer Kunden jederzeit vor. Sollten neue Verordnungen, Gesetze und Richtlinien zu einer Einschränkung der Betriebserlaubnis führen, so kann der Erwerber nicht darauf berufen und keine Rechte daraus herleiten. Wir werden ab Kenntnis jedoch die entsprechenden Änderungen sofort vornehmen.

Hersteller und Design:

Skinial AG
Grienbachstrasse 11
CH-6302 Zug, Schweiz
www.skinial.com
info@skinial.com

Ursprungsland: China

Zielgruppe:

Dieses Gerät darf nur von geschulten Personen verwendet werden, die eine Skinial Ausbildung für PMU und/oder Body Entfernung erfolgreich absolviert haben oder bereits eine kosmetische oder medizinische Ausbildung haben oder eine mehrjährige Erfahrung im Umgang mit Pigmentiergeräten.

Im Falle eines Weiterverkaufs sollte diese Betriebsanleitung dem Gerät mitgegeben werden. Dieses Gerät unterliegt dem Urheberrechtsschutz und darf ohne Genehmigung der Skinial AG weder kopiert, geöffnet, umgebaut noch technisch verändert werden.

Zug, im November 2018
Skinial AG

Skinial S 400

MACHINE DE DÉTATOUAGE

Manuel Utilisateur

français (12-22)



1 TABLE DES MATIÈRES

Description du produit / utilisation prévue :

Cet appareil peut être utilisé pour éliminer et corriger les pigments indésirables causés par le maquillage permanent, le tatouage ou le microblading. Toutes les restrictions et instructions relatives au traitement explicitement mentionné dans l'apprentissage cutané s'appliquent. Pendant le traitement, les conditions prescrites, hygiéniques et légales commerciales, nationales et locales, doivent être respectées. Vérifiez auprès de vos associations de l'industrie et des autorités car ces conditions sont sujets à des changements et ajustement constant.

Ce dispositif convient à la fois à la dépigmentation et à la fixation de maquillage permanent et de tatouages. Notez les exigences spécifiques éventuellement requises et la qualité des aiguilles.

Données techniques

Alimentation : CA 100-240V / 50-60 Hz

Sortie : 19V / 2A

Puissance : 24W

Contenu de la livraison :

Le jeu de produits S 400 contient les composants suivants

- 1 x unité de contrôle
- 1 x support mécanique et magnétique pour l'unité de contrôle
- 1 x alimentation avec prise européenne
- 1 x pièce à main
- 1 x câble de connexion
- 10 x aiguille cutanée 7 RS
- 1 x support pour la pièce à main avec deux perforations pour pots d'encre de 9 mm

En option, une pédale est disponible.

Sécurité :

- Cet appareil ne doit être utilisé que par des personnes formées ayant suivi une formation de Skinial en traitement de PMU et / ou enlèvement tatouages corps, ou ayant déjà fait des études de cosmétique ou de médecine, ou possédant plusieurs années d'expérience dans la manipulation de dispositifs de pigmentation.
- En cas de revente, ce manuel doit être remis à l'appareil.
- Ceci est un appareil professionnel, gardez-le hors de portée des enfants.
- Utilisez uniquement l'alimentation d'origine.
- En cas de dommage ou de dysfonctionnement, veuillez nous envoyer l'appareil avec la preuve d'achat à l'adresse suivante. N'ouvrez pas les appareils vous-même et n'effectuez aucune réparation non autorisée, faute de quoi la garantie expirera.

Logistic-Mail-Factory GmbH
c / o MIMO GmbH
Affinger Street 7
D-86167 Augsburg

- Une utilisation, un stockage ou un transport inapproprié de L'unité de contrôle ou de la pièce à main peut entraîner des dommages. L'utilisation prévue de l'appareil, telle que spécifiée dans le présent manuel d'utilisation, constitue la condition préalable à une utilisation sûre pour vous et vos clients et la base de la garantie du fabricant.

2 Mise en fonction de l'unité de contrôle

Assurez-vous que l'adaptateur, la pièce à main et la pédale (en option) sont correctement connectés (voir les instructions de montage ci-dessous).

Connection pièce a main

Connexion de la pédale
(facultatif)

Connection de l'alimentation



Assemblage du support de l'unité centrale

(6) Retirez toutes les pièces du kit de support de l'emballage



- (7) Décidez si vous souhaitez équiper le support de ventouses (surface lisse) ou d'aimants puissants (surface métallique).
- (8) Montez les trois aimants ou ventouses au bas de la plaque de base triangulaire du support.
- (9) Fixez le contrôleur à l'avant du cadre en métal à l'aide des vis à pression fournies, que vous insérez par l'arrière à travers le trou du cadre en métal et que vous vissez dans le filetage à l'arrière du contrôleur. Assurez-vous que l'unité de contrôle se trouve toujours sur une surface ferme et stable.



- (10) Rangez les pièces restantes de l'appareil afin de pouvoir remplacer les pieds en cas de changement de surface.



3 INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ CENTRALE

- (1) Touchez la zone "POWER" avec votre doigt pendant trois secondes pour allumer ou éteindre le contrôleur. (Écran tactile)
- (2) Sélectionnez la vitesse préréglée en appuyant sur le bouton (IOI). Nous recommandons "140 / Min. BROW" en standard pour les traitements PMU et corps. Pour les peaux sensibles, la vitesse peut être réduite.
- (3) Touchez la zone "START" pour démarrer l'appareil. En appuyant sur les touches ">", vous pouvez augmenter la vitesse par incréments de 10 ou la réduire par incréments de 10 en appuyant sur la touche "<". La vitesse peut également être modifiée pendant le fonctionnement de l'appareil.
- (4) Maintenant, réglez la longueur d'aiguille correcte sur le combiné. Tournez le fil (voir le point 4 du manuel / combiné) sur la longueur d'aiguille souhaitée.
- (5) NPS = vitesse approximative de l'aiguille ; coups de l'aiguille par seconde.
- (6) L'appareil peut également être utilisé pour des applications de maquillage permanentes. Pour les applications Skinial, vous ne devez utiliser que les paramètres BROW et LIP. Veuillez-vous assurer de régler la vitesse de l'aiguille correcte.
- (7) Une pédale (optionnelle) peut être connectée à la prise "Foot".

Dans le "Menu", sélectionnez des préréglages supplémentaires, tels que

- a. EYE - Eyes (PMU uniquement)
- b. LIP - Lèvres (Skinial + PMU)
- c. BROW - Sourcils (Skinial Body & PMU + PMU)
- d. MEDICAL - (applications médicales)
- e. MESO - (mésothérapie)



Affichage à LED (affichage du menu et vitesse)

Augmenter la vitesse

Choix du menu


Réduire la vitesse

Démarrer / arrêt de la pièce a main

Interrupteur marche / arrêt

4 La PIÈCE A MAIN

- (1) Connectez la pièce à main à l'unité de contrôle.
- (2) Insérez la cartouche à aiguille sur la pièce à main. Assurez-vous que la cartouche est bien en place.
- (3) Vous pouvez régler la longueur de l'aiguille en tournant la tête de la pièce à main.

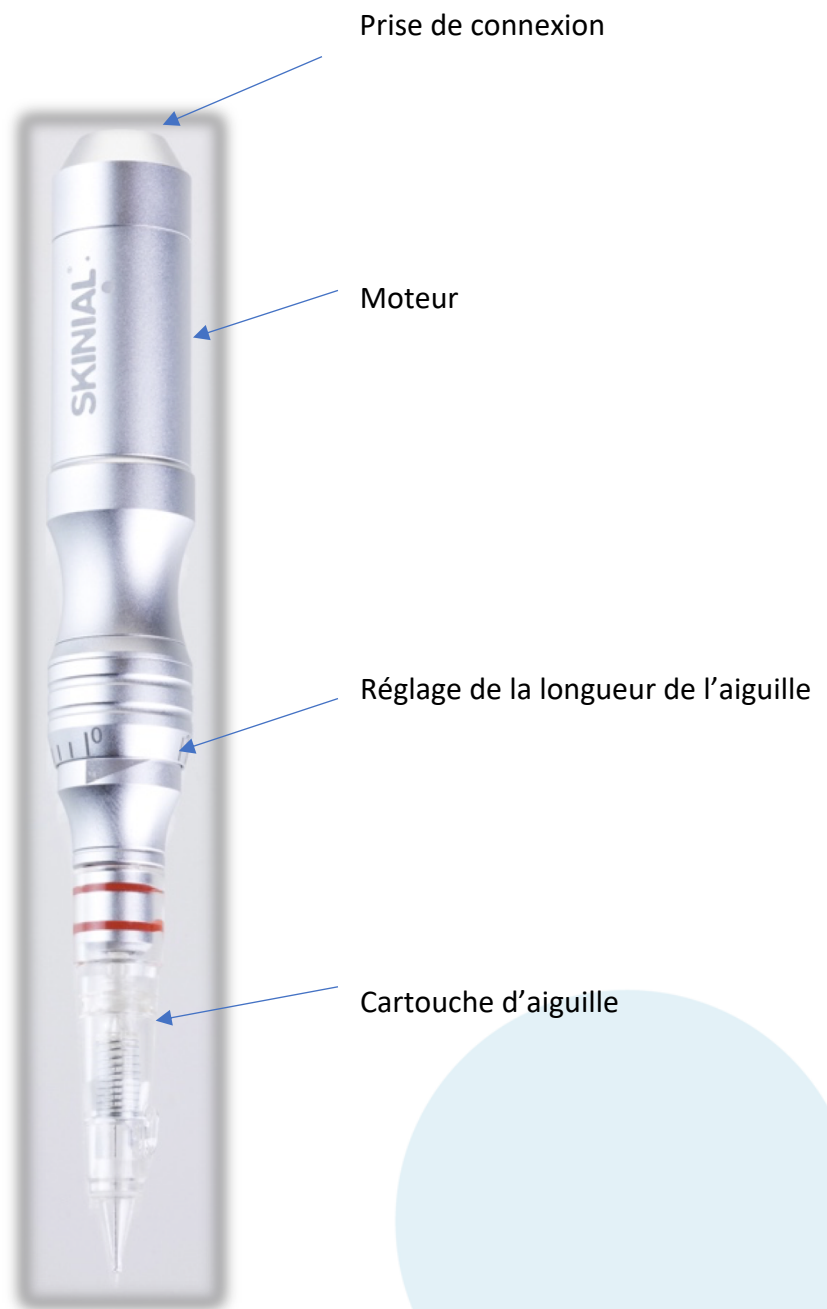

Remarque :

1. La pièce à main Skinial S-400 utilise un moteur suisse 12V. N'utilisez en aucun cas un bloc d'alimentation avec une tension supérieure à 12 V.
2. Utilisez si possible uniquement l'alimentation Skinial d'origine.
3. Pour ajuster la longueur de l'aiguille, démarrez l'instrument à vitesse lente pour voir à quelle distance l'aiguille dépasse de la cartouche.
4. Tournez la tête filetée avant et corrigez le centre de l'aiguille à la longueur souhaitée sur un fond clair pendant le fonctionnement de l'appareil. L'échelle imprimée est relative, elle n'est pas calibrée et ne peut donc pas être utilisée pour régler le millimètre.

Ajustez la longueur de l'aiguille en tournant



5. Ne serrez pas trop le fil de réglage de la longueur de l'aiguille car cela pourrait endommager la pièce à main.
6. Vérifiez régulièrement la longueur de l'aiguille pendant le traitement afin de détecter en temps voulu les modifications accidentelles. Si vous ne placez pas correctement la cartouche sur la pièce à main, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement.
7. Veuillez stocker et jeter une aiguille jetable usagée dans un récipient séparé (déchets dangereux) et ne jamais utiliser d'aiguilles usagées.

5 PIÈCE À MAIN

Placez toujours le combiné de manière stable et sécurisée dans son support, comme indiqué ci-dessous (photo). Des poignées en plastique antidérapantes se trouvent sur la surface de support et sur le fond. Des puits de poterie bicolores (9 mm) garantissent un remplissage stable avec le liquide de nettoyage Skinial correspondant.



6 CARTOUCHE D'AIGUILLE

Nous n'utilisons que des cartouches à aiguilles de haute qualité. ATTENTION : Pour éliminer les pigments avec Skinial, seule la taille d'aiguille 7 RS convient. Skinial propose des tailles de cartouche supplémentaires à utiliser avec l'outil de maquillage permanent. Chaque aiguille est emballée individuellement et stérilement.



Boîte de 10, emballage unique



Cartouche de précision

7 AUTRES

Normes, lois, étiquetage des produits (déclaration de conformité CE)

Cet appareil est conforme à toutes les normes juridiques nécessaires dans l'UE, y compris la déclaration de conformité CE au moment de la rédaction. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques dans l'intérêt de nos clients à tout moment. Si de nouveaux règlements, lois et réglementations entraînent une restriction du permis d'exploitation, l'acquéreur ne peut s'en prévaloir et ne peut en tirer aucun droit. Cependant, nous apporterons les modifications nécessaires immédiatement après la connaissance.

Fabricant et design :

Skinial AG
Grienbachstrasse 11
CH-6302 Zug, Suisse
www.skinial.com
info@skinial.com

Pays d'origine : Chine

Groupe cible :

Cet appareil ne doit être utilisé que par des personnes formées ayant suivi avec succès une formation de Skinial en PMU et / ou enlèvement de corps, ayant déjà fait des études de cosmétique ou de médecine ou possédant plusieurs années d'expérience dans la manipulation de dispositifs de pigmentation.

En cas de revente, ce manuel doit être remis à l'appareil. Cet appareil est protégé par le droit d'auteur et ne peut être copié, ouvert, modifié ou altéré sans l'autorisation de Skinial AG.

Zug, novembre 2018
Skinial AG

Skinial S 400

PIGMENT REMOVAL DEVICE

User Manual

english (23 – 33)



1 CONTENTS

Product description / intended use:

This device can be used to remove, and correct unwanted pigmentation caused by permanent make-up, tattooing or microblading. All restrictions and instructions with regard to the treatment explicitly mentioned in the Skinial Training apply. During the treatment, the respective national and local prescribed, hygienic and trade-legal conditions are to be kept. Check with your industry associations and regulators for these conditions are subject to constant change and adjustment.

This device is suitable both for the removal, as well as the attachment of permanent make-up and tattoos. Note the possibly required special requirements and needle qualities.

Technical specifications

Power supply: AC 100-240V / 50-60 Hz

Output: 19V / 2A

Power: 24W

Scope of delivery:

The S 400 product set contains the following components

- 1 x control unit
- 1 x mechanical and magnetic holder for the control unit
- 1 x power supply with EU plug
- 1 x handpiece
- 1 x connection cable
- 10 x Skinial needle 7 RS
- 1 x holder for the handpiece with two perforations for 9 mm ink pots

Optionally, a footswitch is available.

Safety instructions:

- This device should only be used by trained persons who are undergoing a Skinial training in PMU and / or body removal, or who already have a cosmetic or medical education, or have several years of experience in handling pigmentation devices.
- In the case of a resale, this manual should be given to the device.
- This is a professional device, keep it away from children.
- Please use only the original power supply.
- In the event of damage or malfunctions, please send us the device with the proof of purchase to the following address. Do not open the devices yourself and do not carry out any unauthorized repairs, as otherwise the guarantee expires.

Logistic-Mail-Factory GmbH
c / o MIMO GmbH
Affinger Street 7
D-86167 Augsburg

- Improper use, storage or transportation of the controller or handpiece may result in damage. The intended use of the device as specified in this operating manual is the prerequisite for safe use for you and your customers and the basis of the manufacturer's warranty.

2 CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF THE CONTROL UNIT

Make sure the adapter, handpiece and footswitch (optional) are properly connected (see assembly instructions below).

Connection of the handpiece

**Connection of the footswitch
(optional)**

**Connection of the
power supply unit**



Assembly of the control unit holder

(1) Remove all parts of the holder kit from the packaging



- (2) Decide whether you want to equip the holder with suction cups (smooth surface) or with the strong magnets (metal surface).
- (3) Mount the three magnets or the suction cups to the bottom of the stand's triangular base plate.
- (4) Secure the controller to the front of the metal frame using the supplied setscrews, which you insert from the rear through the opening in the metal frame and screw into the thread on the back of the controller. Make sure that the control unit always stands on a firm and stable surface.



- (5) Store the remaining parts of the fixture in order to replace the feet in the event of a changed surface.



3 OPERATING INSTRUCTIONS OF THE CONTROL UNIT

- (1) Touch the "POWER" area with your finger for three seconds to turn the controller on or off. (Touch screen)
- (2) Select the present speed by touching the (IOI) button. We recommend "140 / Min. BROW" as standard for PMU and Body treatments. For sensitive skin, the speed can be reduced.
- (3) Touch the "START" area to start the device. By pressing the ">" buttons, you can increase the speed in increments of 10 or reduce it in 10 steps by pressing the "<" button. The speed can also be changed while the device is running.
- (4) Now set the correct needle length on the handset. Turn the thread (see point 4 under instructions / handset) to the desired needle length.
- (5) NPS = approx. Needle speed; Strokes of the needle per second.
- (6) The device can also be used for permanent make-up applications. For Skinial applications, you should only use the BROW and LIP settings. Please make sure to set the correct needle speed.
- (7) A footswitch (optional) can be connected to the "Foot" socket.

In the "Menu", select additional presets, such as

- a. EYE - Eyes (PMU only)
- b. LIP - Lips (Skinial + PMU)
- c. BROW - Eyebrow (Skinial Body & PMU + PMU)
- d. MEDICAL - (medical applications)
- e. MESO - (meso-therapy)



LED display (menu display and speed)

Increase speed

Menu selection


Reduce speed

Start / stop of the handpiece

On / off switch

4 THE HANDPIECE

- (1) Connect the handpiece to the control unit.
- (2) Insert the needle cartridge onto the handpiece. Make sure the cartridge clicks into place.
- (3) By turning the handpiece head, you can adjust the needle length.

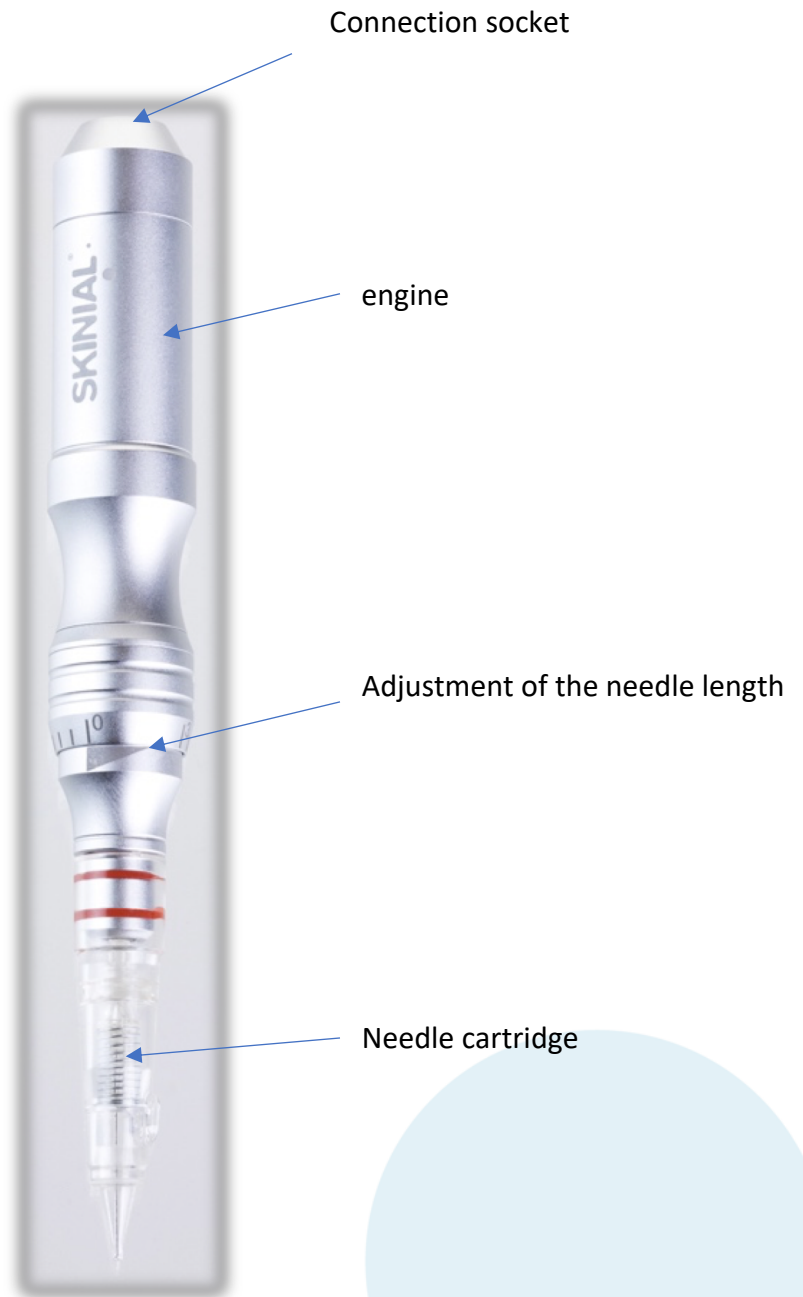

Note:

1. The Skinial S-400 handpiece uses a Swiss 12V motor. Under no circumstances should you use a power supply unit with more than 12 V voltage.
2. Use only the original Skinial power supply if possible.
3. To adjust the needle length, start the instrument at a slow speed to see how far the needle protrudes from the cartridge.
4. Turn the front threaded head and correct the needle hub to the desired length against a light background while the device is running. The printed scale is relative, it is not calibrated and therefore cannot be used to set the millimetre.

Adjust needle length by turning



5. Do not over-tighten the needle length adjustment thread as this could damage the handpiece.
6. Regularly check the correct needle length during treatment to detect any accidental changes in good time. Failure to properly seat the cartridge on the handpiece may result in malfunction.
7. Please store and dispose of a used disposable needle in a separate container (hazardous waste) and never use used needles.

5 HANDSET HOLDER

Always place the handset stably and securely in the solid handset holder as shown below (picture). On the support surface and on the bottom are non-slip plastic knobs. Two colour potty wells (9 mm) guarantee a stable filling with the respective Skinial removal liquid.



6 NEEDLE CARTRIDGES

We only use high quality needle cartridges. **ATTENTION: For pigment removal with Skinial only the needle size 7 RS is suitable.** Skinial offers additional cartridge sizes for use with the Permanent Make-Up Hand Tool. Each needle is individually and sterile packed.



Box of 10, single packaging



Precision needle cartridge

7 MISCELLANEOUS

Standards, Laws, Product Labeling, (CE Declaration of Conformity)

This device complies with all necessary legal norms in the EU including the CE Declaration of Conformity at the time of writing. We reserve the right to make changes and technical improvements for the benefit of our customers at any time. If new regulations, laws and regulations lead to a restriction of the operating permit, then the acquirer cannot rely on it and cannot derive any rights from it. However, we will make the necessary changes immediately after knowledge.

Manufacturer and Design:

Skinial AG
Grienbachstrasse 11
CH-6302 Zug, Switzerland
www.skinial.com
info@skinial.com

Country of origin: China

Target group:

This device should only be used by trained persons who have successfully completed a Skinial training in PMU and / or body removal or who already have a cosmetic or medical education or have several years of experience in handling pigmentation devices.

In case of a resale this manual should be given to the device. This device is protected by copyright and may not be copied, opened, modified or altered without the permission of Skinial AG.

Zug, November 2018
Skinial AG